

COMFY® het digitale ventiel voor optimaal zuurstofgebruik

Zonder te rekenen, altijd weten
hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit.



Westfalen
Medical



Inhoud

- 03 COMFY®
- 04 De voordelen van zuurstofcilinders met het digitale COMFY® ventiel
- 06 Altijd weten waar de cilinder is.

COMFY® geeft u de tijd om dat te doen wat echt belangrijk is.

COMFY® is het antwoord op vragen als:

- Hoelang kan ik met de zuurstofcilinder mijn patiënten nog van zuurstof voorzien?
- Zal ik de cilinder retourneren en wisselen voor een volle? Ik kan niet zien wat de inhoud is.
- Hoe groot is mijn cilindervoorraad en waar staat deze?
- Hoeveel tijd ben ik kwijt om te berekenen hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit en maak ik daar dan geen fouten in?

Zuurstof tot de laatste drup

Met COMFY® verspilt u geen zuurstof en mag u erop vertrouwen dat de geïntegreerde alarmfunctie u waarschuwt bij kritieke momenten, bijvoorbeeld wanneer de zuurstof onder het minimum niveau komt. Ervaring leert dat wij cilinders terug krijgen die nog meer dan de helft aan zuurstof bevatten. Dit kan gereduceerd worden tot 15% zodat er een winst is van 40 tot 45%.

Samengevat staat COMFY® voor:

- › Gebruikersgemak: exacte weergave van de hoeveelheid zuurstof, de resterende looptijd en de cilinderdruk.
- › Veiligheid: alarmfunctie bij laag zuurstofniveau.
- › Gestroomlijnde logistiek voor het leveren en ophalen van zuurstofcilinders.
- › Duurzaamheid: minder zuurstofcilinders door optimaal gebruik, minder transport, minder opslagruimte.

Uitvoering	Druk
2 Liter	200 bar
5 Liter	200 bar

De voordelen van zuurstofcilinders met het digitale COMFY® ventiel

Bij ons staat de zorg voor uw patiënten centraal. Daarom bieden wij naast de traditionele zuurstofcilinders met geïntegreerde afsluiter nu ook een digitale versie aan. Deze geavanceerde oplossingen zijn ontworpen om de zuurstofvoorziening in uw zorginstelling nog efficiënter, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken, zodat u de tijd krijgt om te doen wat echt belangrijk is.

Voordelen van zuurstofcilinders met het digitale COMFY® ventiel

1. Gebruiksgemak

U hoeft zelf niet meer te rekenen. U krijgt een exacte weergave van de hoeveelheid zuurstof, de resterende gebruikstijd en de cilinderdruk. Dit wordt duidelijk aangegeven op het digitale display. Hierdoor weet u altijd hoe groot uw zuurstofvoorraad is.

2. Veiligheid

Zodra de inhoud van de cilinder onder een kwart zakt en kort voordat de cilinder leeg is, krijgt u een alarmsignaal. Hierdoor bent u altijd op tijd voor het bestellen van een nieuwe cilinder. Daarnaast beschikt de COMFY® over een ophangstelsel, zodat deze veilig opgehangen kan worden.

3. Kostenbesparing

Met de COMFY® gaat u efficiënter met uw zuurstof om. Ervaring leert dat wij cilinders terugkrijgen die nog meer dan de helft aan zuurstof bevatten. Dit kan gereduceerd worden, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van iedere druppel zuurstof.

4. Duurzaamheid

Door optimaal gebruik van de zuurstof in de cilinder, heeft u minder zuurstofcilinders nodig, minder transport en minder opslagruimte.

Scan voor meer informatie de QR-code.



- › Duidelijk digitaal display waarop u de hoeveelheid zuurstof en resterende gebruikstijd afleest.
- › Alarmsignaal met indicatie lampje als de inhoud van de cilinder onder een kwart zakt en kort voordat de cilinder leeg is.
- › Veilig ophangstelsel en handvat.
- › Geschikt voor gebruik op de MRI.
- › Afzuigaansluitingen met snelkoppeling en slangnippel.
- › Aluminiumfles van hoge kwaliteit.
- › Eenvoudig aan te sluiten op Simplinic software.

Altijd weten waar de cilinder is.

Zonder rekenen!



U heeft geen idee waar en hoeveel cilinders zich in uw instelling bevinden? Dat is makkelijk op te lossen!

De Bluetooth-Low-Energie-Sender in het Comfy ventiel maakt het lokaliseren van de cilinder mogelijk. Door de bluetooth te verbinden met de slimme software van Simplinic kunt u elk moment de cilinders volgen en nauwkeurig lokaliseren.



Verbonden met uw mobiel of computer

De combinatie van de zuurstofcilinders met de Simplinic-software is uitsluitend bedoeld voor het lokaliseren van de cilinders en het aflezen van de inhoud. Het is niet voor medische doeleinden.

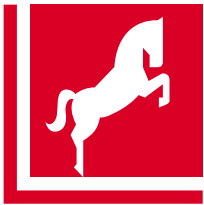


Foto Deventer Ziekenhuis

- 01 COMFY® zuurstofcilinder
- 02 COMFY® in gebruik
Deventer Ziekenhuis
- 03 COMFY® in gebruik
Deventer Ziekenhuis



Foto Deventer Ziekenhuis



Westfalen Medical BV

Rigastraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 858 404
Fax 0570 - 858 451

verkoop@westfalenmedical.nl
zorginstellingen.westfalenmedical.com

Westfalen
Medical